

enovis™

DONJOY®

**HET VOLGENDE
HOOFDSTUK VAN HET
LEVEN BEGINT MET**

ROAM™ OA



DONJOY®

Hét volgende hoofdstuk van het leven begint met

ROAM™ OA

**DE NIEUWSTE INNOVATIE IN UNLOADER
BRACES VAN DONJOY® ONDERDEEL
VAN ENOVIS™**

Help patiënten afscheid te nemen van kniepijn en maak kennis met de ROAM™ OA. Van het ophalen van hun kleinkinderen tot een balletje slaan op de golfbaan, nooit voelde zo'n lichte low profile OA kniebrace zo goed - of was hij zo gemakkelijk voor te schrijven door de arts. ROAM helpt de mobiliteit te verbeteren en biedt verlichting door het ontlasten van de druk van unicompartimentele artrose of andere kniepijn.

**COMFORTABEL, GEBRUIKSVRIENDELIJK EN
EFFECTIEF**

Ideaal voor een grote verscheidenheid aan patiënten die hun dagelijkse beweging wensen te verbeteren en die van een actieve levensstijl houden. Voor conservatieve zorg of als voorbereiding op een operatie, ROAM OA is gemakkelijk te gebruiken en biedt een hoog niveau van comfort. Consistent gebruik van een unloader kniebrace heeft aangetoond dat het bijdraagt aan het algemeen dagelijks functioneren, minder pijn en verbeterde mobiliteit, wat kan leiden tot meer activiteit en een betere levenskwaliteit.

BEDOELD GEBRUIK/INDICATIES

Voor patiënten met symptomen, fysieke of radiografische radiografische aanwijzingen van:

- matige tot ernstige unicompartimentele artrose van de knie.
- postoperatieve meniscale scheuren alleen wanneer unicompartimentele offloading geïndiceerd is.
- varus-valgus knieaandoeningen die baat kunnen hebben bij unicompartimentele ontlasting.




COMFORTABEL, EFFECTIEF EN GESTROOMLIJND

- Zeer low profile, lichtgewicht, past onder kleding - het volledig zwarte design is modern, discreet en ademend.
- Ontlast het gewricht van de knie dynamisch.
- Door de gepatenteerde 8-vormige pad aan de zijkant van de knie is de knieholte volledig vrij van straps.
- Flexibele schelpen omsluiten en ondersteunen dij en kuit op comfortabele wijze.
- Ontworpen voor een breed scala aan lichaamstypen en patiëntenbehoeften.
- Zachte voering met siliconen voelt heerlijk aan op de huid; voorkomt verschuiven ; 2-x Cool Technology-vezels zorgen voor een blijvend koel gevoel.
- Aanpasbaar en sluiten perfect aan bij de anatomie van de patiënt.

ELKE BRACE BIEDT TWEE FITTING MOGELIJKHEDEN

Uniek ontworpen brace die kan worden aangemeten voor links lateraal en rechts mediaal, of omgekeerd rechts lateraal en links mediaal; Dit resulteert in een drastische vermindering van het aantal referenties. Minder is echt veel beter.

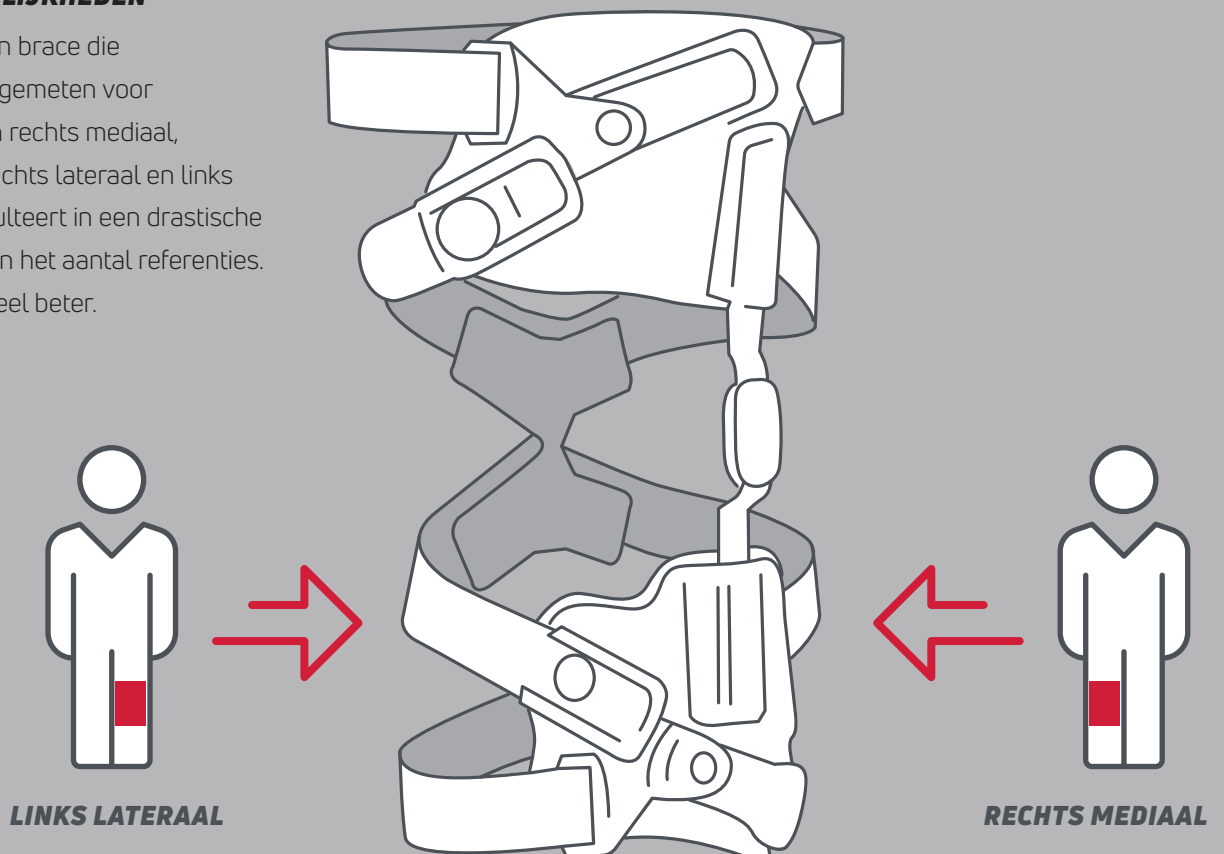



PATIENTGERICHT; VOORGESCHREVEN VOOR PERFECTE COMPLIANCE

- INSTEL- EN VERGEETTECHNOLOGIE: Je kunt je brace aan- en uitdoen zonder de instellingen van uw aanmeter te veranderen.
- Twee gemakkelijke bevestigingspunten; een hoorbare "klik" van de veilige magnetische gespen geeft patiënten (ook die met gezichts- of handvaardigheidsproblemen) vertrouwen en zekerheid.
- Patiënten kunnen op ieder gewenst moment ondersteuning en pijnverlichting kiezen; Het BOA® Fit-systeem maakt het gemakkelijk en duidelijk met een visuele indicator.



3-PUNTS DYNAMISCHE ONTLASTING

Doel: Als de knie naar volledige extensie of flexie beweegt, verhoogt of verlaagt de spanning op de condyl pads en het 8-vormig gepatenteerde pad van ROAM™ respectievelijk. Dit zorgt voor ontlasting wanneer dat het meest nodig is en verhoogt het comfort.

Als de knie in flexie beweegt, ontspannen het strapsysteem en de condylus en de condylaire brace ontspannen en verminderen de belasting.


- Het is comfortabel om de brace in zittende positie te houden, omdat de belasting automatisch wordt verminderd.




Naarmate de knie naar volledige extensie beweegt, verhogen het strapsysteem en de condyl-brace de spanning en zorgen ze voor meer verlichting.

- Gunstig wanneer de patiënt actief is
- Concentreert de ontlasting wanneer artrosepijn het meest voorkomt in de laatste 30 graden van extensie.


FUNCTIES EN VOORDELEN

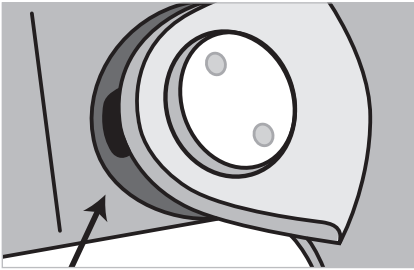


EASY MAG-ALIGN CLIPS: Deze gepatenteerde magnetische clips helpen de banden uit te lijnen zonder gedoe. Houd gewoon het uiteinde bij de bevestiging en 'klik', je bent klaar.

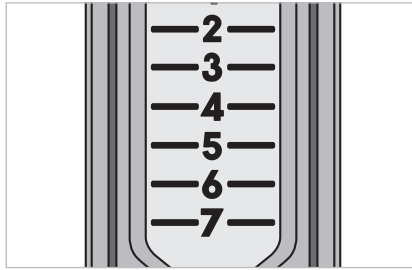


INTEL- EN VERGEET-TECHNOLOGIE: Je kunt je brace aan- en uitdoen zonder de instellingen van uw aanmeter te veranderen.

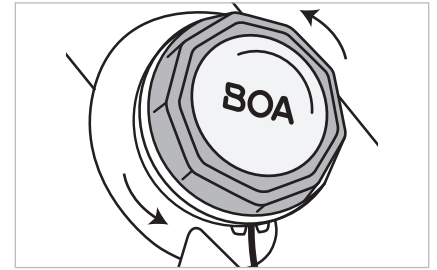

BOA® DRAAIKNOP VOOR PRECIËS DE JUISTE FIT: Draai de knop omhoog of omlaag om precies de juiste fitting van de brace te verkrijgen.

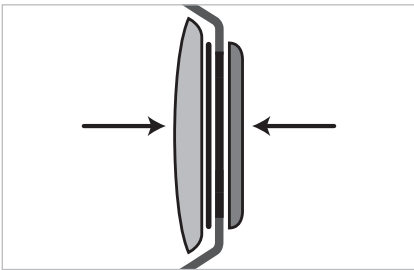


DUN SCHARNIER: Het slanke scharnierontwerp zorgt voor een discrete pasvorm onder losse kleding.

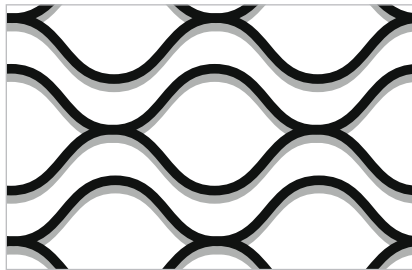

ANTI-MIGRATIE TECHNOLOGIE: Zachte silicone zorgt ervoor dat de brace op zijn plaats blijft gedurende de dag.



8-VORMIG GEPATENTEEERDE PAD: De positionering van de straps zijn zo ontworpen dat de achterkant van uw knie volledig vrij blijft van wrijving.

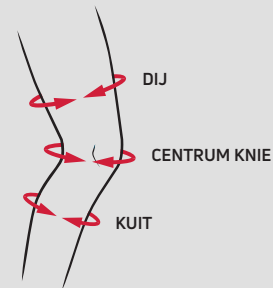

RECHTS MEDIAAL / LINKS LATERAAL		LINKS MEDIAAL / RECHTS LATERAAL		OMTREK DIJ	CENTRUM KNIE	OMTREK KUIT	MAAT
ARTIKELNUMMER	GTIN CODE	ARTIKELNUMMER	GTIN CODE				
11-1726-1-06000	0190446769347	11-1725-1-06000	0190446769439	33 - 47 cm	30.5 - 35.5 cm	25.5 - 35.5 cm	XS/S
11-1726-3-06000	0190446776710	11-1725-3-06000	0190446777212	47 - 59.7 cm	35.5 - 43.2 cm	35.5 - 45.5 cm	M/L
11-1726-5-06000	0190446776727	11-1725-5-06000	0190446777229	59.7 - 81.3 cm	43.2 - 58.4 cm	45.5 - 61 cm	XL/XXL/XXXL

DONJOY[®]

enovis[™]

Creating Better Together[™]

Enovis[™] - DJO Benelux BVBA
| Kleinhoefstraat 5 | bus 39 | 2440 Geel | België
www.enovis.be

Medische hulpmiddelen van Klasse I met CE-markering.
Lees de instructies zorgvuldig voor gebruik. Vraag advies aan een arts. Fabrikant: DJO LLC - USA.

MKGBNLBV106 - Rev A - 06/2024

Copyright © 2024 DJO, LLC, une filiale d'Enovis

